

MUJI 無印良品

38967330

音波電動牙刷(牙刷另售) **家庭用**
型號：MJ-ET1

使用說明書

- 感謝您購買本公司產品。
- 使用前請務必閱讀本使用說明書後正確使用本產品。
- 請務必妥善保管本使用說明書。

授權：良品計畫 株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地址：台北市東興路8號8樓
客服電話：(02)2762-8151
網址：http://www.muji.tw

製造商：ツインバード工業株式會社
地址：〒959-0292 新潟縣燕市吉田西太田2084-2
電話：0120-337-455

無印良品 保證書		
條碼	38967330	購買門市店章
品名	音波電動牙刷(牙刷另售) 型號：MJ-ET1	
機號		
保固期限	※保固期限：1年	
本證書不會補發，請妥善保管。		
※本保證書，依照所刊載之品項提供保固服務。 ※ 電器類商品無提供維修服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書， 若無保證書，恕無法受理保固服務。 ※若未加蓋門市店章，本保證書則視為無效。		

- 本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。
- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品、配件與保證書洽詢本公司各門市。
※網路通路門市販售除外，請與原購買通路洽詢。
 - 若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - ②購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③火災、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④未能出示或提供本保證書時。
 - ⑤保證書上未註明購買日期及購買門市，或是字句遭到修改時。
 - ⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的用上所造成的故障及損壞。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汗損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
 - 部分商品提供零件販售，相關事宜請洽本公司各實體門市或致電客服專線。
 - 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

安全須知 請務必遵守

為保護用戶及他人免受人身傷害或財產損失，在使用前請務必閱讀此安全須知，並正確使用本產品。請先閱讀以下表示內容，並請遵守內容所記載事項。

- 表示說明
- | | |
|---|--|
|  警告 「若操作不當可能導致死亡或重傷」 |  注意 「若操作不當可能造成受傷或物品損害」 |
|---|--|

- 其他圖示說明
- | | |
|--|---|
|  為禁止的項目 |  為必須執行的「強制」項目 |
|--|---|

本體	
 警告	
 請勿放置於孩童可取得處可能因吞食可拆卸零件而造成受傷。 禁止	 若發生異常及故障，請立即停止使用可能產生發熱或火災等危險。 強制

注意	
 請勿使用含有較多研磨劑的除煙漬牙垢牙膏、美白用牙膏可能導致產品故障。 禁止	 請勿沾染髮型定型產品、生髮產品或是護手霜可能導致故障或是外觀出現損傷。 禁止
 請勿刻意沉入、放置於水中可能導致產品故障。 禁止	 請避免產品掉落，或是遭受強大外力撞擊可能造成受傷或導致產品故障。 禁止
 請勿放置於太陽直射處、車內、或熱源家電附近可能導致產品變形、變色或故障。 禁止	 請勿在產品電源呈現「ON」狀態下任意放置可能造成受傷或導致產品故障。 禁止
 請勿自行分解、或進行修理、改造可能導致受傷或導致產品故障。 分解禁止	 保養時，請勿使用稀釋劑、含石油之研磨劑或噴霧清潔劑可能導致變質或變色。 禁止

注意 (接續)	
 請避免牙刷與他人共用可能導致感染。 禁止	 若口腔有異狀，或是有治療中的牙齒或狀況不安定之假牙時，請避免使用可能導致牙齒與牙齦損傷。 禁止
 請勿用於刷牙以外之用途可能導致故障。 禁止	 孩童或是無法自行操作者，口腔內感覺較不敏銳者，請勿使用可能導致故障。 禁止
 牙周病患者，請徵得醫師同意後再行使用可能導致牙齒與牙齦損傷。 強制	 若孩童需使用時，請務必由保護者在旁協助可能導致牙齒與牙齦損傷。 強制
 請勿將牙刷強行且持續性的接觸牙齒及牙齦可能導致牙齒與牙齦損傷。 禁止	 需清洗產品本體時，請確實緊閉電池蓋若本體進水，可能導致故障。 強制

電池	
 警告	
關於鹼性電池	若不慎電解液沾附到衣服或皮膚時，請立即以清水清洗。若滲入眼中，請立即以清水沖淨並盡速就醫可能導致皮膚或眼睛的損害。  強制
 請勿使電池短路、分解、加熱、或放入火源中可能導致電池漏液、發熱或破裂。 禁止	

注意	
敬請遵守以下事項。若電池的使用方法有誤，可能導致漏液、發熱或破損。亦可能造成產品故障、受傷或周邊環境汙損。請遵守電池上所記載之內容，並以正確方式使用。	
 請確認正極、負極位置並避免放錯	 在放入電池前請先將本體完全擦乾，並確定內部無水滴殘留 強制
 敬請使用有效期限內的電池	 若於2週以上皆未使用，請務必將電池卸除 強制
 請勿使用充電式電池	 電池消耗完畢後請盡快取出更換 強制
 請勿於電池上直接使用熱熔焊接	禁止

規格	
電源	DC1.5V AAA鹼性乾電池(LR03)1個(電池另購)
牙刷震動數(約)	30,000次/分
電池壽命(20°C時)(約)	180分鐘(1次2分鐘計算，約可使用90次)
製品規格(約)	寬24x深32x高202 mm
製品重量(約)	70g (不含電池、牙刷)
附屬內容	本體、使用說明書(附保證書)


點檢	
★檢查長年使用的音波電動牙刷！	
在使用時，有沒有出現這些情形呢？	電池漏液 電池比平常熱 電池的端部部分出現生鏽
停止使用	為防止故障與事故發生，請停止使用，將電池拔除，並與販賣門市聯絡。

保養

- 若本體產生髒汙，請將廚房用清潔劑稀釋後沾於布上，徹底擰乾後擦拭。之後再以乾布擦乾。
- <清洗牙刷>
 - 水洗
 - 請勿使用40°C以上熱水
 - 水洗後請務必完全濕乾
- <清洗本體>
 - 請先確認電池蓋是否確實關緊
 - 水洗
 - 請勿使用40°C以上熱水
 - 清洗後，將內側水分濕乾，外側請使用乾布完全擦乾。
- <清洗外蓋>
 - 水洗
 - 請勿使用40°C以上熱水
 - 蓋子內側可能有髒汙附著殘留。請務必定期清潔蓋子內側。
 - 清洗後，請使用乾布完全擦乾。
- <牙刷不易取下時>
 - 可能因牙膏殘留，硬化而導致牙刷不易取出之情形產生。此時請將本體用水或溫水沖洗2-3分鐘後再試取下。
- <攜帶、搬運時>
 - 若在產品內側呈濕潤狀態時放入化妝包或袋中，即使蓋有蓋子仍可能從上部排水孔中溢出水而導致隨身物品受損。請先將水分徹底擦乾。


注意	
 保養時，請勿使用稀釋劑、含石油之研磨劑或噴霧清潔劑可能導致變質或變色。 禁止	
 若需清洗產品本體時，請確實緊閉電池蓋若本體進水，可能導致故障。 強制	
 請勿放置於太陽直射處、車內、或熱源家電附近可能導致產品變形、變色或故障。 禁止	
 請勿刻意沉入、放置於水中可能導致產品故障。 禁止	

部件名稱與功能

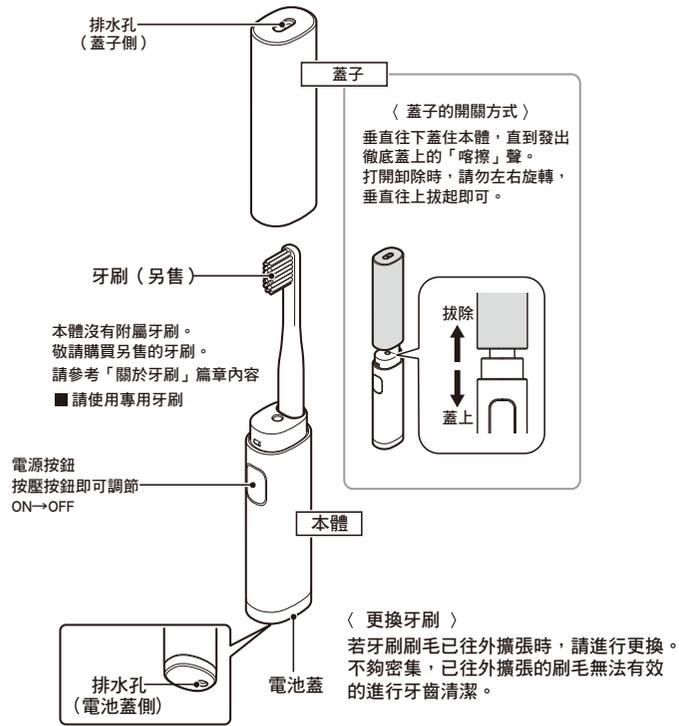

操作方式 (接續)

3. 將牙刷放入口中後按下電源按鈕

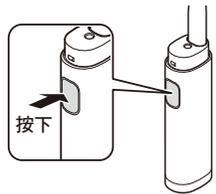

注意

- 為防止牙膏飛散，請務必在牙刷放入口中後再按下電源按鈕。
- 請確實按壓按鈕。

4. 刷牙

請以1次2分鐘為基準進行使用。



注意


- 請以手帶動牙刷來進行口腔清潔。若僅是牙刷接觸牙齒表面，無法達到良好的清潔效果。
- 請勿將牙刷強行且持續性的接觸牙齒及牙齦。

正確的牙刷接觸方式
〈牙齒與牙齦的交接處〉

- ① 將牙刷以45度角置於牙齒與牙齦的交接處，約3-5秒，在牙齦不感到疼痛的狀態下輕輕接觸。
(利用音波震動的力量使髒污更容易浮出並脫落。)



- ② 以一次2-3顆牙刷為基準，清潔每一處牙齒與牙齦的交接處。

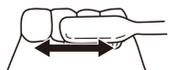

電池的裝入方式

電池無附屬。敬請購買市售的AAA鹼性乾電池 (LR03)

注意



請勿使用充電式電池

禁止



在放入電池前請先將本體完全擦乾，並確定內部無水滴殘留

使用需知

- 請使用AAA鹼性乾電池(LR03)
其他的電池因電力較弱、電池壽命較短等特性無法使本產品順利驅動。
- 電池電力變弱時會感到震動變小，刷磨感變弱
此時請更換新的AAA鹼性乾電池(LR03)

1. 卸除電池蓋




2. 裝入電池


請務必將AAA鹼性乾電池(LR03)
放入正確的正負極位置。

通知

電池的使用時間基準：約180分鐘
(1次2分鐘，大約可用90次)

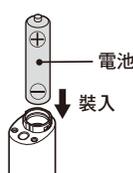


3. 蓋上電池蓋

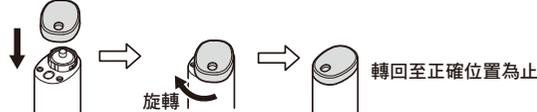

〈牙齒內側、外側表面、臼齒的咬合處〉

- ① 將牙刷刷毛呈直角，輕輕停留3-5秒清潔牙齒表面。
(利用音波震動的力量使髒污更容易浮出並脫落。)

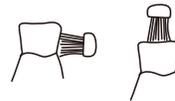

- ② 以一次2-3顆牙刷為基準，清潔每一顆牙齒。



注意

上排與下排牙齒請分開清潔。

- ⑤ 清潔完畢後，請在牙刷仍保持在口中時按下按鈕關閉電源。

注意

為防止牙膏飛散，請一定要在保持於口中的狀態按下電源使其動作停止。

- ⑥ 將牙刷自本體中拔除。



- ⑦ 清洗牙刷與本體。


請參考「保養」篇章中的內容，進行牙刷與本體的清潔。

注意

口腔清潔結束後，在牙刷與本體間可能滲入液體或水，亦有可能因為牙膏凝固而導致牙刷難以抽離之情形。
請將牙刷拔除，水洗後並徹底瀝乾。

操作方式

1. 打開蓋子

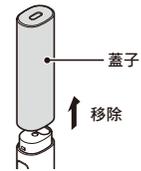

2. 裝上牙刷

牙刷的刷毛處與
電動牙刷座的按鈕為同一朝向



注意

請勿將位置朝向錯誤的牙刷裝入電動牙刷座中。

- 請將牙刷徹底裝入至接觸牙刷底座為止。

裝上牙刷後

請確認牙刷是否已徹底固定。



關於牙刷

牙刷為消耗品。
若須購買時，請先洽詢購買門市。
本製品可使用下表的牙刷。

2017年4月現在

品名	顏色	JAN	長度
牙刷・極細毛	透明	4549738970507	180mm
	透明藍	4549738970514	
	透明棕	4549738970521	
	透明黃	4549738970538	
牙刷	白	4549738970545	180mm
	藍	4549738970552	
	灰黃	4549738970569	
牙刷・極細毛(4色組)		4549738970583	
牙刷(4色組)		4549738970590	

不可使用上述以外的其他牙刷。
可根據牙刷的規格改變，而出現對象牙刷變更的可能性。

〈更換基準〉牙刷刷毛已向外擴張時請進行更換。
不夠密集，已往外擴張的刷毛無法有效的進行牙齒清潔。

狀況排除

狀況	問題來源	處理方式
沒有動作	電池是否已消耗完畢？	請更換新的鹼性乾電池。
	有確實按下電源按鈕嗎？	請確實地按下電源按鈕。
牙刷的力道微弱時	電池是否已消耗完畢？	請更換新的鹼性乾電池。 (本產品為鹼性乾電池專用)
	是否放入鹼性乾電池以外的不同種類電池？	
	牙刷有確實裝入最底層嗎？	請將牙刷徹底裝入，直到碰到最底部。
是否有使用專用牙刷呢？	請使用專用牙刷。	